


PROPULSE®

Jaunākās paaudzes ausu
kopšanas sistēma

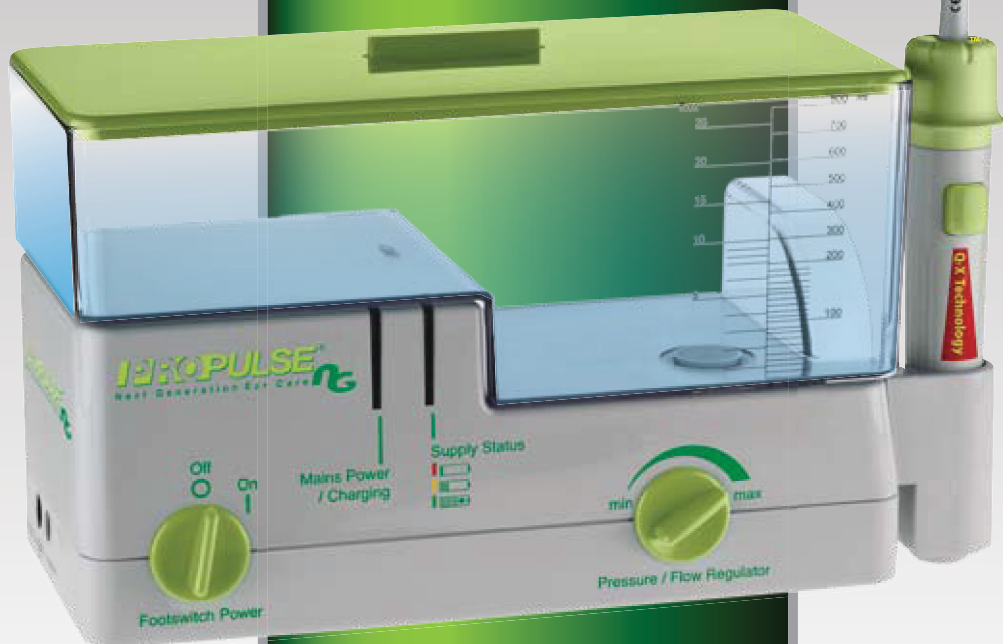

Izmantojiet patentēto
CONTRAPULSE®
drošības sistēmu

QrX™ tehnoloģija



Inovātais redzējums, risinājumi dzīvei™

Jaunais patentētais *Quick-Release* rokturis un *QrX™* vienreizējās lietošanas uzgaļi

Propulse® Ng elektriskais ausu skalotājs tagad pieejams ar jaunu, patentētu *Quick-Release* atlaišanas rokturi un *QrX™* vienreizējās lietošanas uzgaļiem. Ar *QrX™* sistēmas palīdzību uzgaļis lietošanas laikā tiek fiksēts vietā, tāpēc *Propulse® Ng* ir vienkārši lietojams un atbilst modernākajām tehnoloģijām.

Lai izvairītos no infekciju pārvešanas pacientu starpā, klīnikas darbiniekiem katrai procedūrai jāizmanto jauns skalotāja uzgaļis.*

Jauns *QrX™* uzgaļis



Iepakojumā ietilpst 100 atsevišķi iepakoti, nesterili vienreizējās lietošanas uzgaļi.

Propulse® Ng QrX™
maināmie uzgaļi (#100)
KIT4002

* Nacionālās ausu aprūpes vadlīnijas — PECC.
www.earcarecentre.com/protocols.htm

Elektriskā ausu skalošanas sistēma

Propulse[®] Ng ir jauna standarta ausu skalošanas sistēma. Tās patentētās un unikālās funkcijas nodrošina drošu, ērtu un pacientiem draudzīgu iekārtas lietošanu.

- *Quick-Release* atlaišanas rokturis
- Vienreizējās lietošanas *QrX[™]* uzgaļi
- *Contrapulse[®]* ūdens padeves sistēma
- *Uzticama Propulse[®]* kvalitāte

Kādēļ izvēlēties *Propulse[®] Ng* ausu skalotāju?

*„Metāla šļirces lietošana ausu ejas skalošanas procedūrā ir novecojusi metode. Pati šļirces uzbūve rada risku.”**

*„Izmantojot tādas elektriskās ausu skalošanas sistēmas kā *Propulse[®]*, auss eju iespējams izskalot daudz efektīvāk nekā ar ausu sēra spiediena likvidācijas metodēm.”**

*Pilnu ziņojumu lasiet www.entnursing.com/earcare.htm.

Propulse[®] Ng skalošanas sistēma ir portatīva un uzlādējama, un tādēļ tā ir ideāli piemērota izmantošanai mājās vizītēs vai vietās, kur nav pieejama elektrība. Tās variējamās spiediena iespējas nodrošina ūdens strūklu pulsāciju, kas ir vienkārši kontrolējama.

Propulse[®] Ng elektriskais ausu skalotājs tagad pieejams ar jaunu, patentētu *Quick-Release* atlaišanas rokturi un *QrX[™]* vienreizējās lietošanas uzgaļiem. Ar *QrX[™]* sistēmas palīdzību uzgalis lietošanas laikā tiek fiksēts vietā, tāpēc *Propulse[®] Ng* ir vienkārši lietojams un atbilst modernākajām tehnoloģijām.

Propulse[®] Ng darbība kontrolējama ar ērtu kājas slēdža palīdzību, kas ļauj darbināt ierīci bez roku palīdzības. Ūdens plūsmu iespējams apturēt, līdz galam nospiežot ūdens padeves apturēšanas pogu. un ūdens padeve tiek atjaunota, šo pogu atkal atlaižot.

Propulse[®] Ng QrX[™] uzgaļi un *Propulse[®]* tīrīšanas tabletes nodrošina ieteicamo higiēnas līmeņa uzturēšanu un infekcijas nodošanas riska samazināšanu pacientu vidū līdz minimālajam līmenim.

Propulse® Ng funkcijas



- *Propulse® Ng* ausu skalotājs ir droša alternatīva tradicionālajām manuālās ausu skalošanas metodēm ar šļirci.
- *Propulse® Ng* ausu skalotājs palīdz vienkārši, ātri un efektīvi atvieglot pacienta stāvokli, iedarbojoties uz ārējā ausu ejā esošo ausu sēru, keratīnu un tajā nokļuvušajiem svešķermeņiem.
- Pateicoties klusākai darbībai, ausu skalošanas procedūra ir patīkamāka.
- *Propulse® Ng* ir 12 mēnešu rezerves daļu un servisa garantija.
- *Propulse® Ng* ausu skalotājs atbilst EK drošības standartiem.

QrX™ tehnoloģiju
aizsargā vairāki iesniegti patenti.

Lietošana

Propulse® Ng elektriskā ausu skalošanas sistēma ir IIa klases medicīniska ierīce. Tā paredzēta ausu sēra, keratīna vai citu (nehigroskopisku) svešķermeņu izskalošanai no cilvēka auss ejas ar ūdens skalošanas procedūras palīdzību. *Propulse® Ng* elektriskā ausu skalošanas sistēma ir sertificēta ar CE zīmi un atbilst:

- medicīnisko iekārtu direktīvas prasībām — 93/42/EEK;
- elektrisko ierīču drošības prasībām — EN60601-1-2;
- elektromagnētiskās saderības prasībām.

Propulse® Ng ausu skalošanas sistēmā ietilpst



- *Propulse® Ng* ierīce
- Integrēts QrX™ rokturis
- *Propulse®* kājas slēdzis
- 10 *Propulse® QrX™* vienreizējās lietošanas uzgaļi
- 10 tīrīšanas tabletes (ar reģistrācijas karti)
- Barošanas vads
- Iekšējs, uzlādējams akumulators
- Lietošanas instrukcija

Propulse® Chlor Clean tīrīšanas tabletes

Propulse auss skalošanas tīrīšanas tabletes — pareizā tīrīšanas līdzekļa lietošana ir ļoti svarīgs ierīces lietošanas faktors. Ja tiek izmantots pārāk spēcīgs tīrīšanas līdzeklis, ierīce ar laiku tiek sabojāta, bet, izmantojot pārāk vāju tīrīšanas līdzekli, ar to nav iespējams nodrošināt atbilstošu tīrīšanas un dezinfekcijas līmeni. *Propulse* tīrīšanas tablešu sastāva formula nodrošina precīzu tīrīšanas līdzekļa koncentrāciju, kas nepieciešams efektīvai un drošai *Propulse* tīrīšanai.

Lūdzu ievērot: ja *Propulse® Ng* ausu skalošanas tiek bojāts, lietojot nerekomendētu tīrīšanas līdzekli, garantija vairs nav spēkā.verfallen.



PROPULSE®

Jaunākās paaudzes ausu
kopšanas sistēma

„Mirage Health Group Ltd.”
BioPark Hertfordshire
Broadwater Road
Velingārdensitija (Welwyn Garden City)
Hertfordšira (Hertfordshire), AL7 3AX UK

Biroja tālrunis: +44 (0) 845 130 5440
Fakss: +44 (0) 845 130 6440

www.miragehealthgroup.com



Inovatīvs redzējums, risinājumi dzīvei™

Izdošanas datums:
2008. gada decembris



MD 523880

Izplatītājs: